

# ima médica

“Máx**IMA** Calidad y Servicio”

Número de aviso: 2314102002C00191



# CATETER/SISTEMA DE SUCCION ADULTO



## ESPECIFICACIONES

El catéter de succión cerrado desechable se compone por punta suave, doble codo giratorio, puerto para MDI interconstruido, manga de poliuretano para cubrir el catéter y válvula para activar la succión con seguro giratorio.

CODIGO Y COLOR	MEDIDA	LONGITUD
ASPSSC10FR	10 FR	54 cm
ASPSSC12FR	12 FR	54 cm
ASPSSC14FR	14 FR	54 cm



**Aspi-Trach®**

Registro Sanitario No. 0565C2021SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

# CATETER/SISTEMA DE SUCCION PEDIATRICO



## ESPECIFICACIONES

El conector en "Y" pediátrico de Aspi-Trach está diseñado para facilitar el intercambio del adaptador de tubo endotraqueal. El adaptador de tres tamaños diferentes se adapta a diferentes tamaños de tubo endotraqueal simultáneamente, el diseño de ventilación permite la comodidad del paciente de succionar sin detener la ventilación de aire.

CODIGO Y COLOR	MEDIDA	LONGITUD
ASPSSC6FR	6 FR	30 cm
ASPSSC8FR	8 FR	30 cm



Registro Sanitario No. 0565C2021SSA.  
Lease instructivo incluido en el producto


# TUBO ENDOTRAQUEAL DESECHABLE CON Y SIN GLOBO

## RESORTE DE ACERO INOXIDABLE



ESPECIFICACIONES

### CON GLOBO



CODIGO	MEDIDA
INHTECG30	3.0
INHTECG35	3.5
INHTECG40	4.0
INHTECG45	4.5
INHTECG50	5.0
INHTECG55	5.5
INHTECG60	6.0
INHTECG65	6.5
INHTECG70	7.0
INHTECG75	7.5
INHTECG80	8.0
INHTECG85	8.5
INHTECG90	9.0
INHTECG95	9.5
INHTECG10	10

Fabricado con material de PVC suave y flexible no deformado, cuenta con el tubo principal transparente con marcas claras, un balon suave y un ojo liso de murphy.


### CON GLOBO Y ALMA DE ACERO



CODIGO	MEDIDA
INHTEAACG40	4.0
INHTEAACG45	4.5
INHTEAACG50	5.0
INHTEAACG55	5.5
INHTEAACG60	6.0
INHTEAACG65	6.5
INHTEAACG70	7.0
INHTEAACG75	7.5
INHTEAACG80	8.0
INHTEAACG85	8.5
INHTEAACG90	9.0
INHTEAACG95	9.5

Fabricado con material de PVC suave y flexible con espiral de alambre no deformado, cuenta con el tubo principal transparente con marcas claras, un balon suave y un ojo liso de murphy.

### SIN GLOBO



CODIGO	MEDIDA
INHTESG20	2.0
INHTESG25	2.5
INHTESG30	3.0
INHTESG35	3.5
INHTESG40	4.0
INHTESG45	4.5
INHTESG50	5.0
INHTESG55	5.5
INHTESG60	6.0
INHTESG65	6.5

Fabricado con material de PVC suave y flexible no deformado, cuenta con el tubo principal transparente con marcas claras y un ojo liso de murphy.



Registro Sanitario No. 0673C2021SSA  
 Lease instructivo incluido en el producto

# JERINGA DE INSUFLACION



## ESPECIFICACIONES

El dispositivo AG CUFFILL compacto e intuitivo es la solución más precisa para medir tanto la presión como el volumen de los manguitos de las vías respiratorias en todos los entornos clínicos. Su diseño de bolsillo, similar a una jeringa, permite una operación sencilla y fácil por parte de los profesionales médicos, incluidos los socorristas y el personal hospitalario, y por los usuarios en el entorno de atención domiciliaria. El AG CUFFILL está diseñado para mejorar la seguridad del paciente al minimizar el potencial de error humano al medir e inflar los manguitos de las vías respiratorias, además de disminuir el riesgo de contaminación cruzada, cuando se usa para un solo paciente. Se recomienda su uso en un solo paciente para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

## AG CUFFILL

**No. Registro Sanitario:** 0148E2023SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

# LÁPIZ Y PLACA (PARCHE) PARA ELECTROCIRUGÍA



## ESPECIFICACIONES

Compatible con el mayor número de marcas en el mercado  
Monopolar Desechable Corte y coagulación  
Cable de 3 metros de largo con clavija  
Carcasa: plástico ABS grado médico con sellado resistente al agua.  
Electrodo: 70 mm de largo por 2.36 mm de diámetro  
Funciones: Corte y coagulación con código de color universal

Placas OBS con sistema REM (Retorto de Energía Monitorizado)  
Diseñada para pegarse fácilmente en cualquier parte del cuerpo humano.  
Gel conductor No tóxico Cable de 2mts o sin Cable Conector tipo valleylab

**Registro Sanitario No.** 2023E2017SSA

**Registro Sanitario No.** 2031E2017SSA

Lease instructivo incluido en el producto

**OBS**<sup>®</sup>

# MASCARILLA DE VENTILACION (NO INVASIVA, DESECHABLE, ORONASAL)



**313-9506**

BiTrac Select NIV Mascarilla completa con codo estandar (SE) Intercambiable (Adulto Chica)

**313-9507**

BiTrac Select NIV Mascarilla completa con codo estandar (SE) Intercambiable (Adulto Mediano)

**313-9508**

BiTrac Select NIV Mascarilla completa con codo estandar (SE) Intercambiable (Adulto Grande)

**313-9509**

BiTrac Select NIV Mascarilla completa con codo estandar (SE) Intercambiable (Adulto Extra Grande)



**Pulmodyne®**

**Registro Sanitario No.** 1665C2019SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

**ima**médica  
"Móxima Calidad y Servicio"

# CANULA OROFARINGE TIPO GUEDEL CON CODIGO DE COLOR



## ESPECIFICACIONES



### Más seguro por diseño

Utilizando la última tecnología de fabricación, Intersurgical ha producido el primer gran avance en el diseño de vías respiratorias de Guedel en treinta años.

Combinando dos materiales con características físicas muy diferentes en una sola moldura, nuestro diseño de una sola pieza elimina el bloque de mordida separado que se encuentra en todas las vías respiratorias de Guedel convencionales.



**No. Registro Sanitario:** 0089E2022SSA  
Lease instructivo incluido en el producto



# I-GEL® CANULA SUPRAGLOTICA



## ESPECIFICACIONES



Para uso en anestesia y reanimación. i-gel® es un dispositivo de gestión de las vías respiratorias supraglóticas de segunda generación, verdaderamente único, de un solo uso, sin látex ni PVC, que representa la culminación de años de extensa investigación y desarrollo. Hecho de un elastómero termoplástico de grado médico, i-gel® ha sido diseñado para crear un sello anatómico no inflable de las estructuras faríngeas, laringeas y perilaringeas evitando al mismo tiempo el trauma por compresión. La vía aérea supraglótica i-gel® se suministra en un paquete de jaula o soporte protector totalmente reciclable. Este embalaje exclusivo protege el i-gel® durante el transporte y garantiza que mantenga su forma anatómica. i-gel® está disponible en siete tamaños.



**No. Registro Sanitario:** 1042C2021SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

# CANULA SUPRAGLOTICA (MASCARILLA LARINGEA SOLUS) ESTANDAR



## ESPECIFICACIONES



Una gama completa de vías respiratorias con mascarilla laringea de un solo uso adecuadas para anestesia y medicina de emergencia.

Diseñadas para satisfacer las necesidades de una variedad de escenarios clínicos, todas las vías respiratorias con mascarilla laringea

Solus son de un solo uso, no contienen látex y se suministra esterilizado.



**No. Registro Sanitario:** 0402E2006SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

# CAMARA DE HUMIDIFICACION DE AUTO-LLENADO



## ESPECIFICACIONES

La cámara de humidificación de auto-llenado asegura un nivel de agua constante dentro de la cámara, minimizando así los cambios de compliance en el circuito respiratorio.

El sencillo mecanismo de flotador está fabricado de un material rígido no compresible. Esto, combinado con la rigidez del cuerpo de policarbonato, asegura que se mantenga el mismo nivel de agua de forma continua. La cámara de humidificación de auto-alimentación de Intersurgical se suministra completa con el set de alimentación.



**No. Registro Sanitario:** 0084E2002SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

# CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIATRICO FLEXTUBE



## ESPECIFICACIONES

CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIATRICO FLEXTUBE DE 15MM CON CABLE CALENTADOR, TRAMPA DE AGUA, PUERTOS DE MONITORIZACION EN LA PIEZA EN Y CAMARA DE HUMIDIFICACION DE AUTO-LLENADO Y RAMAL DE 0.5M, LONGITUD 1.6M, MCA. INTERSURGICAL R-INT4504810



**No. Registro Sanitario:** 0084E2002SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

# CIRCUITO RESPIRATORIO FLEXTUBE



## ESPECIFICACIONES

Disponemos de un rango de circuitos respiratorios para humidificación activa con uno o dos cables calentadores que además se pueden suministrar junto con las cámaras de humidificación de auto-encendido en caso de que así se requiera. Los circuitos de humidificación activa de Intersurgical son compatibles con la mayoría de bases humidificadoras.



**Registro Sanitario:** 0084E2002SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

# CIRCUITO RESPIRATORIO FLEXTUBE



## ESPECIFICACIONES

Disponemos de un rango de circuitos respiratorios para humidificación activa con uno o dos cables calentador es que además se pueden suministrar junto con las cámaras de humidificación de auto-llenado en caso de que así se requiera. Los circuitos de humidificación activa de Intersurgical son compatibles con la mayoría de bases humidificadoras.



**No. Registro Sanitario:** 0148E2023SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

# MASCARILLA DE ANESTESIA CLEARLITE



## ESPECIFICACIONES



Rango de mascarillas de anestesia que incluye siete tamaños para cubrir las necesidades de todo tipo y tamaño de pacientes.

La gama está disponible desde el tamaño 0 neonatal hasta el tamaño 6 adulto extra grande.



**No. Registro Sanitario:** 0089E2002SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

# LENTE DE FOTOTERAPIA



**NEOTECH**<sup>®</sup>  
Products LLC



## ESPECIFICACIONES

Material de protección ocular suave y acolchado, con un diseño de gafas de sol

Cobertura ocular diseñada para comodidad y seguridad del paciente

La segunda es el antifaz con lengüeta hidrocoloide, que se adhiere a la sien del paciente, por lo cual deja al descubierto la parte anterior de la cabeza.

El materia hidrocoloide es muy gentil con la piel y poco probable que cause alergias e irritaciones, además cuenta con una adherencia adecuada

No hecho con látex de goma natural ni DEHP plastificado

Empaquetado individualmente

**Registro Sanitario No:** 1068C2017SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

**ima**médica  
"MóximA Calidad y Servicio"



# LENTES DE FOTOTERAPIA CON FIJACION DE CINTILLA



## ESPECIFICACIONES

Material de protección ocular suave y acolchado, con un diseño bonito de gafas de sol

Cobertura ocular diseñada para comodidad y seguridad del paciente

La cinta para la cabeza NeoFoam®, suave y patentada, sostiene las NeoShades en posición

Cinta ajustable para la cabeza, diseñada para minimizar el deslizamiento y reducir el moldeado a la cabeza

Forma única de la cinta de la cabeza diseñada para garantizar un ajuste ideal

No hecho con látex de goma natural ni DEHP plastificador

Empaquetado individualmente

**NEOTECH**<sup>®</sup>  
Products LLC

**Registro Sanitario No:** 1068C2017SSA

Lease instructivo incluido en el producto

**ima**médica  
"MóximA Calidad y Servicio"

# SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL Y CPAP HIDROCOLOIDE



## ESPECIFICACIONES


Lengüetas hidrocoloides NeoBond®, cómodas para la piel  
Tamaños macro y gigante disponibles con adhesivo acrílico médico  
Diseñadas para reducir las extubaciones, contribuir a prevenir el trauma palatal y permitir un mejor cuidado oral  
Elimina la necesidad de poner cinta cerca de la nariz o la boca  
Pueden cortarse para retirada de emergencia  
Tamaños codificados por colores  
No hechas con látex de goma natural ni DEHP plastificador  
Empaquetadas individualmente

**NEOTECH**<sup>®</sup>  
Products LLC

**Registro Sanitario No:** 1068C2017SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

**ima**médica  
"MóximA Calidad y Servicio"

# ELECTRODO DE ECG HIDROCOLOIDE NEONATAL ESTANDAR (3/4)

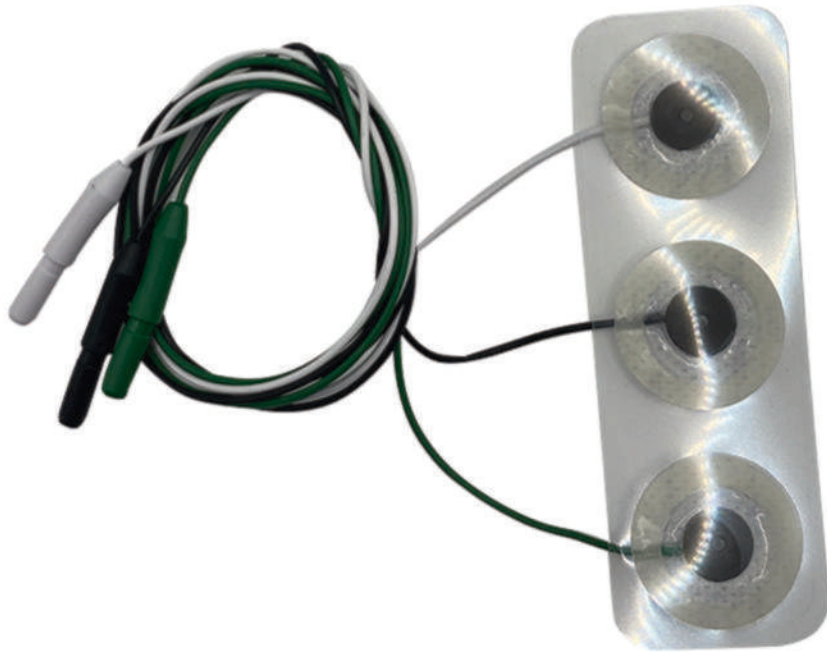

## ESPECIFICACIONES

Electrodos precableados  
Centro de hidrogel  
Bordes hidrocoloides NeoBond® diseñados para:  
Prevenir que el hidrogel supure o se seque prematuramente  
Proveer la estabilidad de los sensores para un mejor trazado  
Minimizar el deslizamiento  
Cables de colores para una fácil identificación  
No fabricado con látex de caucho natural o plastificados DEHP  
Paquetes individuales de 3 conjuntos

**NEOTECH**<sup>®</sup>  
Products LLC

**Registro Sanitario No:** 1890E2019SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

**ima**médica  
"MóximA Calidad y Servicio"

# BORBOTEADORES (HUMIDIFICADOR DE BURBUJAS)



## ESPECIFICACIONES



El borboteador de burbuja de Salter Labs proporciona un funcionamiento confiable y rentable. Ideal para usar con todas las fuentes de oxígeno, concentradores, tanques de oxígeno o salidas de pared. Los exclusivos puertos de difusión rectangulares 360° ofrecen un funcionamiento silencioso con una mejor hidratación y menos contra presión del sistema. El diseño de su rosca tipo mariposa disminuyen las fugas de gas y facilita su colocación. Su conexión para las puntas nasales es universal y de fácil manipulación. Diseño de la tapa totalmente nueva, con refinamientos incorporados, dando como resultado un alto rendimiento y durabilidad.

Frasco grabado permanentemente con marcas que indican el nivel de agua: Mínimo y Máximo. Disponible con alarma pop-off de 6 PSI.

Alta resistencia a caídas. Libre de látex.

## MANEJAMOS TODA LA LINEA

 **SALTER LABS**®

**Registro Sanitario No.** 1839E2011SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

  
"Móxima Calidad y Servicio"

# MASCARILLAS, LINEAS DE OXIGENO (TUBOS Y ADAPTADORES DE SUMNISTROS), CANULAS NASALES



**1007**



**ESPECIFICACIONES**

Mascarilla con diseño debajo de la barbilla para un excelente ajuste según los diferentes tamaños de caras. Vinyl transparente y suave para comodidad del paciente y valoración visual. Adaptador giratorio para ajustar a la posición del paciente. Clip nasal ajustable que asegura un ajuste cómodo. Bolsa reservorio de 750 ml. Incluye 7 ft (2.13 metros) de tubería para suministro de oxígeno.



**1041**



**ESPECIFICACIONES**

Mascarilla de vinyl transparente y suave para comodidad del paciente y valoración visual, clip nasal ajustable que asegura un ajuste cómodo, incluye 7 ft (2.13 metros) de tubería para suministro de oxígeno.



**1103**



**ESPECIFICACIONES**

La popular cánula sobre el oído de Hudson ha estandarizado la industria por décadas y ofrece una amplia gama de configuraciones. La tubería del labio flexible y contorneada proporciona un alto nivel de estabilidad y comodidad al paciente el diseño de sobre oído provee comodidad y seguridad. Disponible con conector estándar y universal y con tubería star lumen en una variedad de tamaños.

**Registro Sanitario No.** 1751E2002SSA

**Registro Sanitario No.** 1775E2022SSA

Lease instructivo incluido en el producto

**MANEJAMOS TODA LA LINEA**

  
**HUDSON RCI®**

**ima**médica  
"MóximA Calidad y Servicio"

# CIRCUITOS Y NEBULIZADORES



**BD2494 BD2498**



**ESPECIFICACIONES**

El circuito Bain es una modificación coaxial del sistema Mapleson D. Está diseñado para una mejor humidificación y conveniencia para el paciente. Permite un mayor control en los niveles de presión arterial de dióxido de carbono ( $\text{PaCO}_2$ ). 1.50 m de longitud.  
Bolsa de 3lt y filtro. Incluye puerto para línea de muestreo de gas y bolsa reservorio.  
**Tamaño Adulto y Pediátrico**



**HUD351213**



**ESPECIFICACIONES**

Circuito fijo en Y para anestesia de 1.52m, bolsade 3 litros y filtro.  
Las configuracionesde estrella fija utilizan un diseño popular de 10° casi paralelo Las configuraciones de estrellagiratoria premium se articulan para abordar las necesidades de colocación de circuitos especializados.  
Configuraciones disponibles con o sin puertos de muestreo en la estrella o el codo  
Tubería estándar o expandiblede 22 mm.  
Fácil de colocar opciones de configuración.  
Con látex tradicional.  
**Tamaño Adulto y Pediátrico**



**HUD1884**



**ESPECIFICACIONES**

Micro mist, el pequeño nebulizador de volumen es diseñado para el funcionamiento y la economía e incluye los rasgos de diseño necesarios por médicos de cuidado respiratorios de hoy. Esto puede ser usado para tratamientos hechos a mano o en vigor. - nebulizador - tamaño de partícula óptimo entregado en tarifas eficientes de nebulización ( $\text{mmad} = 2.1$  micrones) - el funcionamiento constante en ángulos hasta 90 grados que permite la entrega de medicamentos a pacientes colocando horizontalmente o con exigencias especiales - el motor se queda en el lugar a no ser que intencionalmente lo quiten - sello fácil, el gorro roscado y la capacidad de 8cc anti derrame de el tarro para prevenir el escape, con "t", con boquilla, con tubo de depósito, 7 pies de tubería y conector universal.

**Registro Sanitario No.** 1733E2002SSA

**Registro Sanitario No.** 1696E2002SSA

Lease instructivo incluido en el producto

**MANEJAMOS TODA LA LINEA**

  
**HUDSON RCI®**

**ima**médica  
"MóximA Calidad y Servicio"

# CIRCUITOS, MASCARILLAS Y RESUCITADORES



CANULA	TAMAÑO FRENCH	CODIGO	RANGO DE PESO INFANTES GR
0	10	1683	<700
1	12	1685	700-1250
2	13	1686	1250-2000
3	15	1687	2000-3000
4	16	1688	>3000
5	20	1689	1-2 AÑOS



1277	NEONATO
1278	INFANTE
1279	PEDIATRICO
1280	ADULTO MEDIO (JOVEN)
1281	ADULTO
1282	ADULTO MAYOR(GRANDE)



## ESPECIFICACIONES

Sistema de CPAP nasal para infante.  
 Incluye: Cánula, Codo conector inspiratorio,  
 Codo conector espiratorio, Gorro de sujeción  
 Dos secciones 6 velcros Dos secciones el  
 tubo corrugado Línea ed monitoreode presión

Las mascarillas de anestesia, cuentan con un cojin anatómicamente diseñado para un cómodo cierre hermético bajo presión y conector de 22mm, su válvula permite el inflado opcional del colchón para mejor comodidad.

Diseñado para cumplir con el estándar de bolsas de reanimación (ISO 10651-4).

El exclusivo conector de tubo de oxígeno en ángulo recto gira 360°. Incluye mascarilla, tubo Star Lumen® y conector de oxígeno universal. Dispositivo libre de látex.  
 La opción de manómetro permite un conveniente control de la presión. Empaquetado individualmente en una práctica bolsa con cordón a prueba de manipulaciones.

**Registro Sanitario No.** 1751E2002SSA  
**Registro Sanitario No.** 1379E2021SSA  
**Registro Sanitario No.** 1775E2002SSA

Lease instructivo incluido en el producto

**MANEJAMOS TODA LA LINEA**



**HUDSON RCI®**

**ima**médica  
 "MóximA Calidad y Servicio"

# RESUCITADOR AIRFLOW

LIBRE DE LATEX | USO EN UN SOLO PACIENTE | DESECHABLE | CEMARK |  
La Bolsa de AirFlow para Resucitación y Ventilación viene con un filtro bacterial/viral, una bolsa reservorio de oxígeno y una máscara.



## ESPECIFICACIONES

Las bolsa de resucitación/ventilación está disponibles en 5 tamaños  
Máscara facial proporcion al tamaño de la bolsa de resucitacion  
Elige en una variedad de componentes para ensamblar una bolsa de resucitación que satisface las necesidades particulares de cada paciente

## AIR FLOW ESTÁNDAR (SIN MANÓMETRO DE PRESION)

SERIE	TAMAÑO	VOLUMEN	VOLUMEN SISTOLICO	PK
AF2000MB	PEDIATRICO	1000ML	650-670 ML	10
AF3000MB	INFANTE	300ML	140-170 ML	10
AF5000MB	ADULTO	1900ML	950-960 ML	10

Registro Sanitario No. 1040E2018SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

**ventlab**

**ima**médica  
"Móxima Calidad y Servicio"



# CANULA (TUBO) DE SUCCION YANKAUER



## ESPECIFICACIONES

Canula yankauer con control y con extension de 1.83 mts

Dispositivo medico destinado a ser usado tanto en procedimientos quirurgicos como fuera del pabellon para la aspiracion de fluidos y secreciones del paciente



**COVIDIEN**

**Registro Sanitario No.** 0850E97SSA

Lease instructivo incluido en el producto

**imamedica**  
"Móxima Calidad y Servicio"

# CATETER VENOSO CENTRAL 2 LUMENES 4Fr. X13 cm



**2 LUMENES 4Fr. X13 cm (22 | 22ga)**



**2 LUMENES 5Fr. X13 cm (18 | 20ga)**

**ARROW®**

**Registro Sanitario No.** 0014C90SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

**ima**médica  
"MóximA Calidad y Servicio"

# VIDEOLARINGOSCOPIO ONFOCUS

## PANTALLA ONFOCUS FLEX



-  Hasta 50 intubaciones con una carga
-  Captura fotos y videos memoria interna de 8GB
-  Imagen inigualable pantalla 3" HD
-  Cuenta con movimiento 135°



## PANTALLA ONFOCUS LUX



-  Hasta 50 intubaciones con una carga
-  Captura fotos y videos memoria interna de 8GB
-  Imagen inigualable pantalla 3" HD
-  Cuenta con movimiento 135°



 **n Focus**®  
The Airway  
VideoEcosystem

Lease instructivo incluido en el producto

**ima**médica  
"Máxima Calidad y Servicio"

# VIDEOLARINGOSCOPIO ONFOCUS

## PANTALLA ONFOCUS LITE



-  Hasta 50 intubaciones con una misma carga
-  Captura fotos y videos memoria interna de 8g
-  Imagen inigualable pantalla HD de 3"
-  Hojas de policarbonato garantizadas para 10 reusos en medidas Miller 0, Mac 1 y Mac 3

COMPATIBLE CON  
HOJAS W BLADE Y HOJAS REUSABLES  
EN TODAS SU MEDIDAS

## PANTALLA ONFOCUS ADVANCED



-  Batería de respaldo  
Cable de corriente como  
Batería interna d e 120 min de duracion
-  Captura fotos y videos memoria interna de 8g
-  Pantalla de 7 Pulgadas HD que puedes colocar  
en cualquier trípode o sobre una mesa.
-  Hasta 3 dispositivos conectados de manera  
simultanea

 **n Focus**®  
The Airway  
VideoEcosystem

Lease instructivo incluido en el producto

**ima**médica  
"MáximA Calidad y Servicio"

# MONITOR MULTIPARAMETRICO KN-601A



## ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD de alta resolución de 7pulgadas

Medición Inteligente de ECG / NIBP / SpO2 / PR / Pleth

TEMP Alarma acústica y visual

Batería de Li-ion recargable, hasta una alimentación de 3 horas

**Registro Sanitario No.** 1142E2020 SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

# CARRO PARA MONITOR Y DEMO ELECTROCARDIOGRAFO CON CANASTILLA Y RUEDAS KN 0001



## ESPECIFICACIONES

La base cóncava de aluminio de diseño especial aumenta la seguridad de la movilidad. Bueno y conveniente para transportar en varios lugares. Ideal para dispositivos más pequeños como monitor de signos vitales, pequeños paneles de plataforma, etc

Peso que soporta: 12 Kg

Area central cubierta en base cóncava para contra peso opcional

La placa de montaje deslizante se puede usar con varios dispositivos médicos montados en la parte inferior los paneles de plataforma

Gancho de cable para la gestión de cables C estas para uso general con ganchos para cables

Ruedas médicas de doble rueda de diámetro para facilitar la transición sobre superficies irregulares, antiestáticas. 2 con frenos.

Equipos con los que se puede montar:

Monitores : YJ2000 YJ3000 KN601A .

Electrocardiografos: C E E M 3 0 1



## TAMAÑO Y PESO

Diámetro de base cóncava de aluminio

52 cm (20.4"); ancho centrado sobre al base

Rango de ajuste de altura para adaptarse a diferentes usuarios de altura o altura mínima de 80cm o altura máxima de 125 cm

Lease instructivo incluido en el producto

# ELECTROCARDIOGRAFO ECG EM-301



**3 TIPOS DE CANALES**

**3 / 6 / 9**

**TODOS CON 12 DERIVACIONES**



## ESPECIFICACIONES

Tres modos de funcionamiento: Automático, Manual y Ritmico. Pantalla LCD de 7 pulgadas plegable. Tarjeta SD de 4G con capacidad para 10,000 grupos de ondas de ECG de 12 derivaciones cada 10 segundos. Sistema de impresión de matriz térmica de alta resolución. 8 hrs de funcionamiento con cargas total. 12 derivaciones estándar con protección frente a la desfibrilación.

**Registro Sanitario No.** 0772E2019SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

# CARRO PARA ULTRASONIDO



## ESPECIFICACIONES

Tamaño de escritorio adecuado para todos los sistemas de ultrasonido potable Hechode ABS, fuerte y ligero, fácil de limpiar.  
Protección total para al máquina de ultrasonido, sondas, impresora de video, etc.  
Mango incorporado en el escritorio  
Soportes incorporados para varias sondas y gel  
Cajón incorporado para grabadora



## TAMAÑO Y PESO

Altura: 68 cm  
Ancho: 45 cm  
Largo: 70 cm  
Peso neto: 12 kg

Lease instructivo incluido en el producto



# CARRO PARA ELECTROCAUTERIO



## ESPECIFICACIONES

Adecuado para diversos instrumentos médicos, como una máquina de electrocardiograma, una unidad electroquirúrgica o un sistema de ultrasonido portátil. Diseño de cajón incorporado para almacenamiento de accesorios. Material ABS. Fácil y seguro de limpiar, anti erosión, como alcohol, yodo, oxidol y otros desinfectantes médicos.



## TAMAÑO Y PESO

Altura: 46 cm  
Ancho: 46 cm  
Largo: 75 cm  
Peso neto: 12 kg

Lease instructivo incluido en el producto

# CARRO DE URGENCIAS MA ET750H



## ESPECIFICACIONES

- Cinco cajones  
2 cajones pequeños,  
2 medianos  
1 grande (con chapa y llave)
- Tamaño: 6.5 cm pequeño,  
12 cm mediano,  
25 cm grande.  
Cubierta de Plástico.
- El soporte del desfibrilador puede ser giratorio y rotar 360 grados.
- 1 portasueros ajustable
- 1- compartimento para documentos  
,2 contenedores de punzocortantes,  
2 cesto para desechos  
1 repisa abatible.
- Cuatro ruedas, 2 con freno.
- 4 Columnas de aluminio reforzadas
- Multicontacto doble con extensión de 5 m
- Porta-tanque de oxígeno abatible
- Tablero para reanimación



## TAMAÑO Y PESO

- Tamaño: 75 x 48 x 93 c m
- Peso Neto: 40 Kg



## MATERIAL

- Material ABS



Lease instructivo incluido en el producto

# NEGATOSCOPIO SENCILLO



## ESPECIFICACIONES

La luz LED garantizada funciona de manera consistente y hace que el espectador tenga una vida útil más larga, ahorro de energía y seguridad para los usuarios.

El panel se iluminará automáticamente cuando la película se inserta y se apaga cuando se retira, y los paneles de cada panel funcionan por separado.

Cada panel se puede iluminar y atenuar por separado, cada panel se puede trabajar como un solo visor. La luminancia puede ser modulada en un rango de 1% a 100% continuamente. La temperatura de color es de hasta 8000K

# NEGATOSCOPIO DOBLE



## ESPECIFICACIONES

La luz LED garantizada funciona de manera consistente y hace que el espectador tenga una vida útil más larga, ahorro de energía y seguridad para los usuarios. El panel se iluminará automáticamente cuando la película se inserta y se apaga cuando se retira, y los paneles de cada panel funcionan por separado. Cada panel se puede iluminar y atenuar por separado, cada panel se puede trabajar como un solo visor. La luminancia puede ser modulada en un rango de 1% a 100% continuamente. La temperatura de color es de hasta 8000K. La luminancia puede ser superior a 4000cd/m<sup>2</sup>.

Lease instructivo incluido en el producto

# ELECTROCAUTERIO (GENERADOR ELECTROQUIRURGICO) 100-A



## ESPECIFICACIONES

Uso para Quirófano General, Laparoscopia, Endoscopia, Ginecología, Etc. Uso para instrumentos Monopolares y Bipolares. Cuenta con 9 usuarios de programación. Incluye pedales, cable reusable para placa, cable para uso Bipolar y Pinzas para Neurocirugía. Portable y fácil de usar.



## TAMAÑO Y PESO

Tamaño: 22cm x 13cm x 25cm  
Peso neto: 4kg



## FUENTE DE ALIMENTACION

Entrada: 120-230 V~ 60/50Hz 5A

# OBS<sup>®</sup>

Registro Sanitario No. 2028E2017SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

# ELECTROCAUTERIO (GENERADOR ELECTROQUIRURGICO) OBS-100C



## ESPECIFICACIONES

Uso para Quirófano General, Laparoscopia, Endoscopia, Ginecología, Etc Uso para instrumentos Monopolares yBipolares Cuenta con 9usuarios deprogramación. Incluye pedales, cable reusable para placa,cable para uso Bipolar y Pinzas para Neurocirugía. Portable yfácil de usar



## TAMAÑO Y PESO

Tamaño: 22cm x 13cm x 25cm  
Pesoneto: 4kg



## FUENTE DE ALIMENTACION

Entrada: 120-230 V~ 60/50Hz 5A

# OBS®

**Registro Sanitario No.** 2028E2017SSA  
Lease instructivo incluido en el producto

**ima**médica  
"MóximA Calidad y Servicio"